

NEW OBJECTIVE 发布与新一代质谱仪对接的数字化纳喷雾源

PicoView型号

数字型PicoView 450

产品货号: DPV-450-40 适用于 4000

产品货号: DPV-450-55 适用于4500, 4600, 5500, 5600, 6500

- 1) 数字操控高精度 XYZ平台 (1 μ m精度)
- 2) 超高分辨率数码相机
- 3) PV Acquire™ 平台控制软件
- 4) 自动喷嘴清洗
- 5) 免工具磁性平台盘
- 6) 柱热选择 (仅单柱)
- 7) 已包含鞘气模块
- 8) 灵活喷嘴装配选项允许液接位或针尖高电压施加, 可调整喷嘴角度达到最佳信号
- 9) 完全兼容所有PicoTip®喷嘴和IntegraFrit™, PicoFrit®柱
- 10) 手动或自动切换阀选项
- 11) 易于更换

改进和新设计



数字型PicoView 550

产品货号: DPV-550

适用于 Thermo Fisher LTQ, Orbitrap, Velos, exactive 和 TSQ

- 1) 数字操控高精度 XYZ平台 (1 μ m精度)
- 2) 超高分辨率数码相机
- 3) PV Acquire™ 平台控制软件
- 4) 自动喷嘴清洗
- 5) 柱加热选择 (仅单柱)
- 6) 双柱选项
- 7) 免工具磁性平台盘
- 8) 可使用鞘气 (选配鞘气组件)
- 9) 灵活喷嘴装配选项允许液接位或针尖高电压施加, 可调整喷嘴角度达到最佳信号
- 10) 完全兼容所有PicoTip®喷嘴和IntegraFrit™, PicoFrit®柱
- 11) 手动或自动切换阀选项
- 12) 易于更换

新型号



数字型PicoView 565

产品货号: DPV-565


适用于 Thermo Fisher Fusion 和 Quantiva

- 1) 数字操控高精度 XYZ平台 (1 μ m精度)
- 2) 超高分辨率数码相机
- 3) PV Acquire™ 平台控制软件
- 4) 自动喷嘴清洗
- 5) 柱加热选择 (仅单柱)
- 6) 免工具磁性平台盘
- 7) 可使用鞘气 (选配鞘气组件)
- 8) 灵活喷嘴装配选项允许液接位或针尖高电压施加, 可调整喷嘴角度达到最佳信号
- 9) 完全兼容所有PicoTip®喷嘴和IntegraFrit™, PicoFrit®柱
- 10) 手动或自动切换阀选项
- 11) 易于更换



共同特点

无论您选购哪个型号的PicoView, 每一个型号的PicoView在不同系统中都能为您带来灵活性、可控制性和一致性。

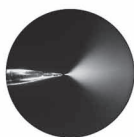

高分辨率
喷嘴和喷雾成像

高分辨视频监视器在放大50-200倍后提供喷嘴最佳观察视角, 更容易进行调整和排除故障。高品质的数码相机很容易就可通过精细定位旋钮控制定位并聚焦。



灵活电压施加
液接位或喷嘴

无论你是想通过微型三通在液接位施加电压, 或是通过SilicaTip™导电镀层施加电压到分析物, 或者要通过离线GlassTips™校准系统, PicoView®都能很容易地实现各种电压施加方式。



免工具
磁锁平台

无需螺丝刀、钳子等工具, 即可更换喷嘴或迅速方便地改变实验。磁性锁平台很容易装回原位而无需再重新细调。可配另一个平台, 在第一个实验进行时, 设置第二个实验。



最优化
减少系统多余体积

PicoView离子源提供了一个阀选项, 以最大程度降低系统的多余体积。组件支架将管路、富集和保护柱有序排列以便快速设定和修改。

www.lumtech.com.cn

北京绿绵科技有限公司

北京总部 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社806-807室(100080) 电话: 010-8267 6061/2/3/4/5/6/7 传真: 010-8267 6068

杭州技术中心 浙江省杭州市华星路嘉绿青苑5栋3单元201室(310012) 电话: 0571-8890 2371/2372/2395 传真: 0571-8717 8257

上海办事处 上海市徐汇区82号光大会展中心E座2601、2603室(200235) 电话: 021-6432 0661 传真: 021-6432 0670

西安办事处 陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦2号楼905室(710054) 电话: 029-8523 6958 传真: 029-8523 6958-802

郑州办事处 河南省郑州市花园路39号郑州国贸中心2-2-606室(450000) 电话: 0371-87095687 传真: 0371-65713275



400-810-8267



绿绵科技
Lumiere Tech Ltd.